

Clever

Dynamic Tibase® – für abgewinkelte Schraubenkanäle



**Dynamic
Tibase®**

Driven by science, not trends.

Dynamic Tibase® für Thommen Medical

Flexibel und unabhängig in der Wahl der Befestigung

Lassen Sie nicht mehr die Implantat Achse Ihre Befestigungsmöglichkeit bestimmen, sondern entscheiden Sie selbst. Die Dynamic Tibase® eignet sich hervorragend für ästhetisch anspruchsvolle verschraubte Versorgung. Mit der Dynamic Tibase® ist es möglich, die Orientierung des Schraubenkanals bis 35° abweichend von der Implantat Achse zu gestalten. Somit können Sie verschraubte Versorgung auch in Situationen einsetzen, die bisher nur mit einer zementierten Lösung versorgt werden konnten.

Für den digitalen Arbeitsablauf stehen CAD/CAM Bibliotheken zur Verfügung. Besuchen Sie hierzu www.thommenmedical.com


3shape

exocad


dental wings



Knochensituation

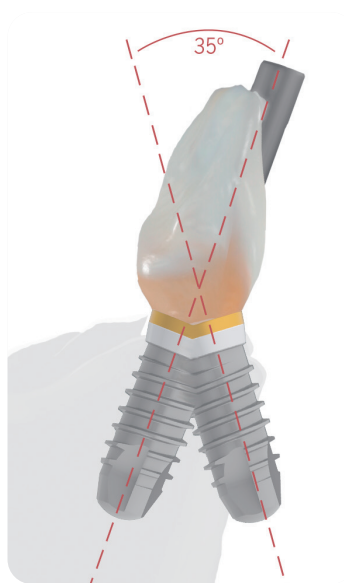



Idealposition

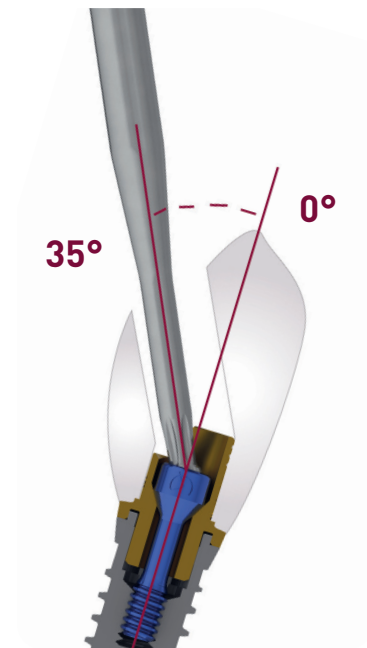

Lösung
Dynamic Tibase®
Ti-Legierung, anodisiert


Zuverlässig

Der 6-lobige Schraubenantrieb ermöglicht eine sichere Befestigung der Versorgung und lässt eine Abwinkelung bis zu 35° zu.

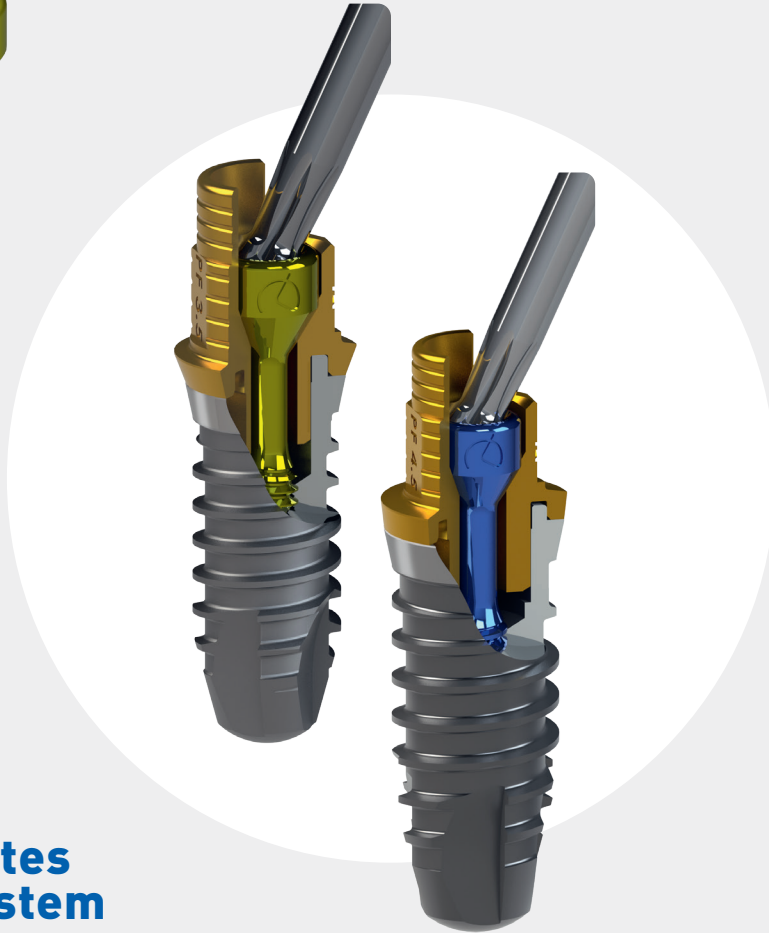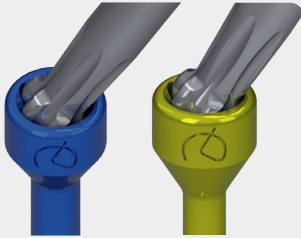

Flexibel


- Für Einzelzahn- und Brückenversorgungen
- Zwei verschiedene Abumentypen: Standard und in den Längen anpassbar
- Zirkuläre Retentionsrillen für die temporäre Anwendung

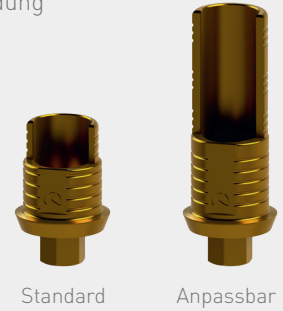

Durchdachtes Captive system


Die Abutmentschraube wird vor der Verklebung in die Ti-Base gesetzt.

- Kleiner Schraubenkanal \varnothing 2.0mm
- Mehr Festigkeit und ein erhöhtes Volumen der Suprastruktur
- Mehr Aussenfläche (z. B. Okklusion)

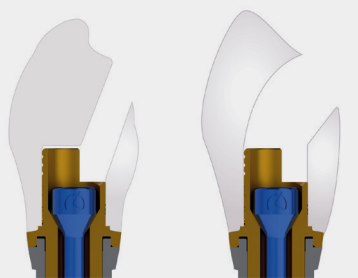

Captive System

Standard System

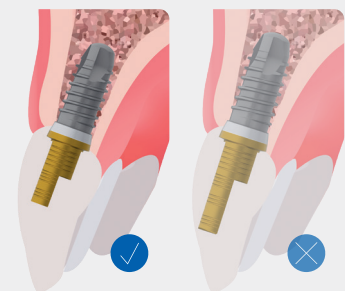

Anpassbar

Mit dem höhenanpassbaren Zylinder wird eine optimale Unterstützung der Suprastruktur gewährleistet.

- Für tiefgesetzte Implantate resp. lange Kronen entsprechend der klinischen Situation
- Maximale Unterstützung der Suprastruktur
- Geeignet für temporäre Versorgung

Vertrieb

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Grenchen | Switzerland
Tel. +41 61 965 90 20
Fax +41 61 965 90 21
info@thommenmedical.com

Hersteller

Talladium España, S.L.
Avenida Blondel, 54, 3º
25002 Lleida | Spain

 0051