

VARIOmulti

Flexible Lösungen für mehrgliedrig
verschraubte Versorgung



Brücke



Full-Arch



Verschraubt



Temporär



Definitiv



Digital



Konventionell



Driven by science, not trends.

Passend zu allen Thommen
Medical Implantaten PF 3.5-6.0

Die VARIOmulti Produktwelt

Gerade und abgewinkelte Abutments sowie ein umfassendes Sortiment an zusätzlichen Originalkomponenten für digitale und konventionelle Arbeitsabläufe



Schlankes Emergenzprofil von abgewinkelten Abutments und verschiedene Halshöhen – mit initialer Schraubensicherung



Abgewinkelte Abutments




Gerade Abutments



Gut zu wissen

Knochenkonturierer ermöglichen die gezielte Entfernung von überschüssigem Knochen im Implantatbereich für einen passiven Sitz von VARIOmulti Abutments.

Jetzt Video anschauen

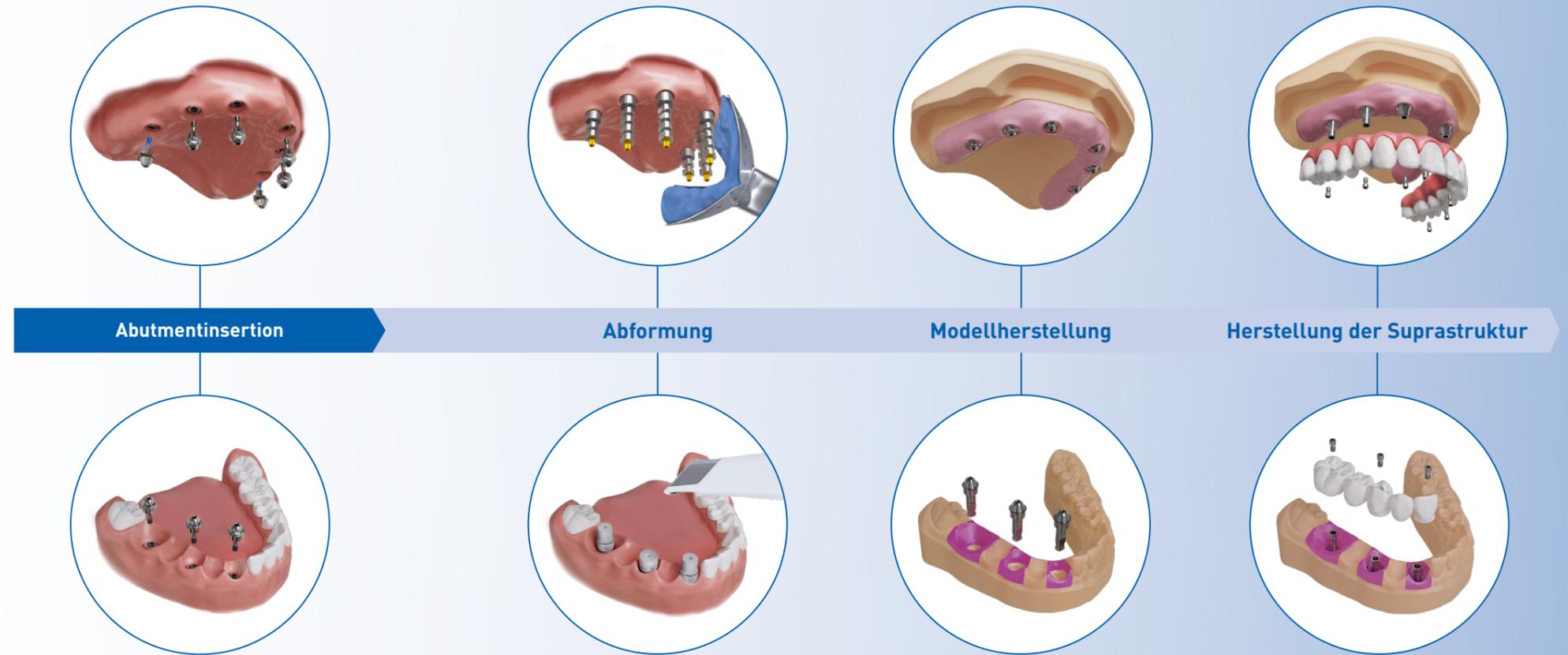

Mehrere Halshöhen und Abwinkelungen ermöglichen eine Anpassung an unterschiedliche anatomische Gegebenheiten



Abformkappe


Einfach kürzbare Abformkappe aus Titan mit eingebauter Sollbruchstelle für eine effiziente und präzise Abdrucknahme

Wiederverwendbare, aufschraubbare einteilige Scanabutments – ohne zusätzliche Schraube. Erhältlich in zwei Höhen für mehr Flexibilität und Präzision bei der digitalen Abformung



Scanabutments

Analoge für eine präzise Positionierung in 3D-gedruckten- und Gipsmodellen

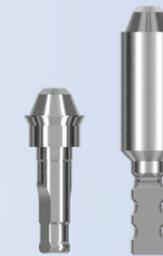

Analoge

Kurze oder kürzbare Titanbasis mit kompakter Geometrie – anpassbar an verschiedene Platzverhältnisse für passiv sitzende Prothetik



Titanbasen

Zusätzliche Komponenten

Einteilige Schutzkappe mit integriertem Gewinde für ein einfaches Aufschauben




Schutzkappe


Provisoriumskappe mit ausgeprägten Makroretentionen für die einfache Herstellung temporärer Rekonstruktionen



Provisoriumskappe

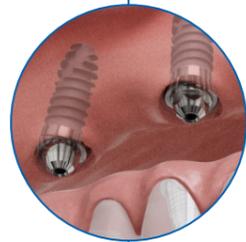


VARIOmulti Abutments schaffen eine zuverlässige Basis für die prothetische Versorgung im Weichgewebe und können Achsendivergenzen von bis zu 40° ausgleichen

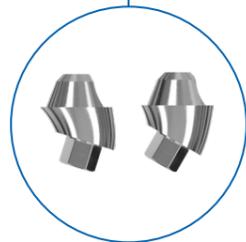

Die um 17° und 30° abgewinkelten Abutments schaffen ein Fundament für das Konzept der Sofortversorgung mit divergent platzierten Implantaten

Erhältlich für PF 3.5-6.0 standardisieren sie die Verbindung in eine einheitliche 4.8 mm Prothetikplattform

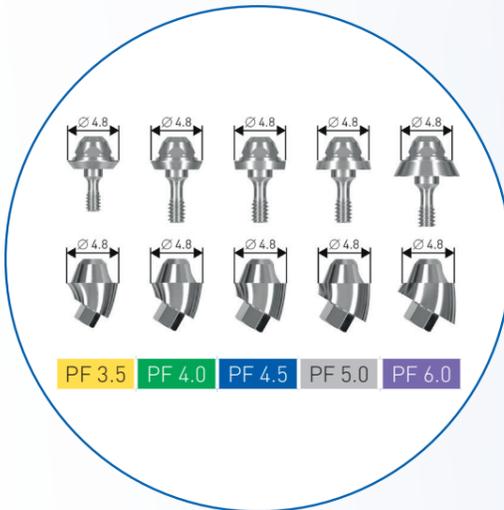

Geeignet für mehrgliedrig verschraubte Versorgungen auf drei oder mehr Implantaten



Die Vorteile von VARIOmulti



Ideale Positionierung der prothetischen Schnittstelle im Weichgewebe durch flexible Abutmenthöhen und Abwinkelungen



Schonendes Vorgehen für das peri-implantäre Gewebe – das Abutment wird einmalig platziert, wodurch wiederholtes Auf- und Abschrauben vermieden und das peri-implantäre Gewebe im weiteren Behandlungsverlauf nicht erneut beansprucht wird



Präzise Verbindung dank flachem Konus mit Schulter, der eine passgenaue Fertigung der Suprakonstruktion unterstützt



Massgeschneiderte und hochwertige Lösungen durch individuell verfügbare Originalkomponenten

Das VARIOmulti Produktangebot

Rotationsgesichert
Rotationsungesichert

PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

VARIOmulti Abutment, mit Handgriff, Titan, steril



Halshöhe (h)

0.8 mm

4.03.600S

4.03.601S

4.03.602S

4.03.603S

4.03.604S

1.5 mm

2.0 mm

4.03.605S

4.03.606S

4.03.607S

4.03.608S

3.0 mm

4.03.610S

4.03.611S

4.03.612S

4.03.613S

VARIOmulti Abutment abgewinkelt, mit Handgriff, Abutmentschraube, Titan, steril



Winkel

Halshöhe (h)

17°

1.6 mm

4.03.300S

4.03.301S

4.03.302S

4.03.303S

4.03.304S

17°

2.5 mm

4.03.310S

4.03.311S

4.03.312S

4.03.313S

30°

1.2 mm

4.03.305S

4.03.306S

4.03.307S

4.03.308S

4.03.309S

30°

2.5 mm

4.03.315S

4.03.316S

4.03.317S

4.03.318S

Abutmentschraube, 4-lobe, Ti-Legierung



Länge

5.8 mm

4.03.500

7.2 mm

4.03.501

Okklusalschraube, 4-lobe, Ti-Legierung



Länge

3.5 mm

4.03.507

Knochenkonturier, Mehrfachgebrauch, Stahl, rostfrei



Länge

29.0 mm

3.03.671

3.03.673

3.03.675

3.03.677

3.03.679

Für VARIOmulti Abutment.

Knochenkonturier+, Mehrfachgebrauch, Stahl, rostfrei



Länge

29.0 mm

3.03.670

3.03.672

3.03.674

3.03.676

Für VARIOmulti Abutment abgewinkelt.

VARIOmulti Schutzkappe, Titan



Ø Höhe
5.3 mm 4.5 mm

4.03.801

VARIOmulti Provisoriumskappe, inkl. Modellierschraube, Titan/Stahl, rostfrei



Ø Höhe
5.2 mm 15.0 mm

3.03.804

VARIOmulti Abformkappe, Titan



Ø Höhe
5.3 mm 18.0 mm

3.04.805

Rotationsgesichert
Rotationsungesichert

VARIOmulti Analog, Stahl, rostfrei



Ø Höhe

4.8 mm 21.2 mm

3.03.800

VARIOmulti Analog für CAD/CAM, Titan



Ø Länge

4.8 mm 13.2 mm

3.03.083



VARIOmulti Scanabutment, Titan, Oberflächenbehandelt, 4-lobe



Ø Höhe

4.5 mm 8.0 mm

3.03.780



VARIOmulti Scanabutment, kurz, Titan, Oberflächenbehandelt, 4-lobe



Ø Höhe

5.0 mm 5.0 mm

3.03.781



VARIOmulti Titanbasis für CAD/CAM, inkl. Okklusalschraube, Titan/Ti-Legierung



Ø Höhe

4.8 mm 4.5 mm

1.04.850



VARIOmulti Titanbasis für CAD/CAM, kürzbar, inkl. Okklusalschraube, Titan/Ti-Legierung



Ø Höhe

4.8 mm 9.0 mm

1.04.851

Abutment/Schraube

Drehmomente für VARIOmulti Komponenten in Ncm

	Drehmomente für VARIOmulti Komponenten in Ncm				
	10	15	20	25	30
VARIOmulti Abutment 		PF 3.5			
				PF 4.0	
				PF 4.5	
				PF 5.0	
				PF 6.0	
VARIOmulti Schutzkappe 	PF 3.5				
	PF 4.0				
	PF 4.5				
	PF 5.0				
	PF 6.0				
Okklusalschraube 		PF 3.5			
		PF 4.0			
		PF 4.5			
		PF 5.0			
		PF 6.0			

Neue abgewinkelte Abutments 2025

Wollen Sie mehr erfahren?
Kontaktieren Sie uns noch heute!



Headquarters

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28, 2540 Grenchen
Telefon +41 61 965 90 20
info@thommenmedical.com
thommenmedical.com